

Sortimentsübersicht

Coloplast Kontinensprodukte

Oktober 2024



Indholdsfortegnelse

Engangskatetre	4
Klar til brug katetre til mænd	4
Luja™ til mænd	5
SpeediCath® Compact	6
SpeediCath Compact Set	7
SpeediCath Flex	8
SpeediCath Control	9
SpeediCath Standard	10
Klar til brug katetre til kvinder	12
Luja til kvinder	13
SpeediCath Compact Eve	14
SpeediCath Compact	15
SpeediCath Compact Set	16
Speedicath Standard	17
Klar til brug katetre til børn	18
Luja til drenge	19
SpeediCath Compact Eve til piger	20
SpeediCath Compact til piger	21
SpeediCath Compact Set til børn	22
SpeediCath Standard til børn	23
EasiCath®	24
Transanal irrigation	26
Uridomer og Urinposere	32
Hudpleje	40
Coloplast kundeservice	42



Alle Coloplasts katetre har Triple Action Coating Technology™, som er en hydrofil overfladebehandling af høj kvalitet med en polymer topcoat. Tre stærkt forbundne elementer, designet til at beskytte urinrøret:



Forbliver glat takket være den særlige polymer topcoat, som muliggør en fremragende vandabsorption. Dette sikrer en lav friktion, glat indføring og reducerer ubehag sammenlignet med ucoatede katetre.



Forbliver fastbundet under indføring og fjernelse på grund af en særlig basecoat, som sikrer en jævn overfladebelægning uden tørre pletter.



Forbliver hydreret på grund af den specielle vandbaserede opløsning, som kvælder den hydrofile overfladebehandling og gør den øjeblikkelig klar til brug.

Kateteranimation

For at sikre at brugerne af vores katetre får den største succes, har vi udarbejdet nogle animationer, som viser, hvordan produkterne anvendes.



Animationerne kan ses på vores hjemmeside www.coloplast.to/sf

Klar til brug katetre til mænd

Luja til mænd

Luja™ er det første og eneste engangskateter med mere end 80 mikrohuller, der er designet til at mindske risikoen for urinvejsinfektioner ved at tømme din blære helt*, hver gang.

- Triple Action Coating Technology sikrer en jævn, glat og fugtig overflade uden tørre pletter, hvilket beskytter urinrøret.
- En fleksibel tip, der gør det nemt og skånsomt at indføre katetret.
- Et blødt greb, der giver kontrol, når katetret indføres.
- En tør beskyttelsesfilm, der gør det muligt at indføre uden at røre ved selve katetret. Beskyttelsesfilmen hjælper dermed til en hygiejnisk kateterisation.



Luja til mænd 33 cm

Størrelse	Varenummer	Varenummer Lommestørrelse
Ch08		20058
Ch10	20031	20061
Ch12	20032	20062
Ch14	20034	20064
Ch16	20036	
Ch18	20038	

Antal pr. æske: 30 stk.

* Luja har tæt på ingen stop i urinflowet, og en komplet blæretømning er defineret som under 10 ml. Individuelle forskelle kan forekomme (NCT05485922, N=42).

SpeediCath Compact til mænd

SpeediCath Compact til mænd er et diskret kateter og er kun 19 cm, når det ligger i kateterhylstret. Det er mindre end halvt så langt som et traditionelt kateter. Både opbevaring, anvendelse og bortskaffelse er derfor meget diskret. Katetret kan indføres uden at overfladen berøres.

- Triple Action Coating Technology sikrer en jævn, glat og fugtig overflade uden tørre pletter, hvilket beskytter urinrøret
- Udviklet specielt til mænd
- Kompakt længde
- Klar til brug
- Ligger i en steril saltvandsopløsning
- Hydrofil overflade
- PVC- og phthalatfrit.

Øger muligheden for non-touch kateterisation i forhold til traditionelle katetre.

SpeediCath Compact til mænd 30 cm

Størrelse	Varenummer
Ch12	28692

Antal pr. æske: 30 stk.



SpeediCath Compact Set til mænd

SpeediCath Compact Set er en alt-i-en-løsning med kateter og integreret urinpose, som giver maksimal frihed til f.eks. kørestolsbrugere, som har svært ved at forflytte sig, sengeliggende, brugere, der skal ud at rejse, eller blot når der ikke er et toilet i nærheden. På grund af den hydrofile overflade, der reducerer ubehag ved indføring, skal der ikke tilføres vand før brug.

- Triple Action Coating Technology sikrer en jævn, glat og fugtig overflade uden tørre pletter, hvilket beskytter urinrøret
- Alt-i-en-løsning
- Diskret design
- Smart indføringsgreb
- Nemt at åbne og genlukke
- Klar-til-brug
- Ligger i en steril saltvandsopløsning
- Hydrofil overflade
- PVC- og phthalatfrit.

Øger muligheden for non-touch kateterisation i forhold til traditionelle katetre.

SpeediCath Compact Set til mænd 30 cm

Størrelse	Varenummer
Ch12	28422

Antal pr. æske: 20 stk.



SpeediCath Flex

SpeediCath Flex til mænd er et blødt kateter med en tør beskyttelsesfilm, der dækker hele katetret, og som har en fleksibel kuglespids. Det har en række fordele, som gør hvert skridt i kateterisationen let. Det er designet til brug ved normal indføring, og hvis der er forsnævringer og andre svære passager.

- Triple Action Coating Technology sikrer en jævn, glat og fugtig overflade uden tørre pletter, hvilket beskytter urinrøret
- Hygiejnisk
- Tør beskyttelsesfilm på hele katetret
- Indføringsgreb, der kan holdes tæt på penis
- Fleksibel og kugleformet tip
- Praktisk genlukkeligt indføringsgreb og emballage.



Øger muligheden for non-touch kateterisation i forhold til traditionelle katetre.

SpeediCath Flex kateter til mænd 33 cm

Størrelse	Varenummer	Varenummer Lommestørrelse
Ch10	28920	28910
Ch12	28922	28912
Ch14	28924	28914
Ch16	28916	

Antal pr. æske: 30 stk.

SpeediCath Control

SpeediCath Control er en kombination af to katetre. Control er 35 cm langt ligesom et traditionelt kateter til mænd. Det fleksible stykke er 32 cm langt og er en størrelse Ch12. Det stivere stykke er 8 cm og er en størrelse Ch16. Denne kombination sikrer, at det fleksible stykke, der indføres i urinrøret, er blødt, og det stivere stykke sikrer, at katetret ikke bøjer ved indføring, og gør det let at indføre i urinrøret.

- Triple Action Coating Technology sikrer en jævn, glat og fugtig overflade uden tørre pletter, hvilket beskytter urinrøret
- Kombination af to katetre
- Bøjer ikke ved indføring
- Klar til brug
- Ligger i en steril saltvandsopløsning
- Hydrofil overflade
- PVC- og phthalatfrit.



Øger muligheden for non-touch kateterisation i forhold til traditionelle katetre.

SpeediCath Control til mænd 35 cm


Størrelse	Varenummer
Ch12	27212

Antal pr. æske: 30 stk.

SpeediCath Standard

SpeediCath Standard-kateter er et engangskateter med en hydrofil overflade, der er klar til brug, samt PVC- og phthalatfrit. Katetret er derfor både brugervenligt og miljøvenligt. SpeediCath Standard-katetrene har en enestående overfladebelægning, der ikke blot dækker ydersiden af katetret, men også indersiden af kateterhullerne.

- Triple Action Coating Technology sikrer en jævn, glat og fugtig overflade uden tørre pletter, hvilket beskytter urinrøret
- Klar til brug
- Ligger i en steril saltvandsopløsning
- Hydrofil overflade
- PVC- og phthalatfrit
- Klæbedot til sikkert ophæng
- Gribering giver let åbning af emballagen.

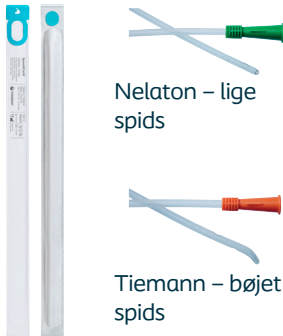

SpeediCath Standard kateter
Nelaton til mænd 35 cm

Størrelse	Varenummer
Ch8	27408
Ch10	27410
Ch12	27412
Ch14	27414
Ch16	27416
Ch18	27418

Antal pr. æske: 30 stk.

SpeediCath Standard kateter
Tiemann til mænd 35 cm

Størrelse	Varenummer
Ch10	27490
Ch12	27492
Ch14	27494
Ch16	27496

Antal pr. æske: 30 stk.



Jason | Kateterbruger

Klar til brug katetre til kvinder

Theresa | Kateterbruger

Luja til kvinder

Luja til kvinder er det første og eneste kompakte engangskateter til kvinder med Micro-hole Zone Technology, der er designet til at mindske risikoen for urinvejsinfektioner ved at gøre det muligt at tømme din blære helt.*

- Triple Action Coating Technology sikrer en jævn, glat og fugtig overflade uden tørre pletter, hvilket beskytter urinrøret
- Nubret håndtag, som giver et godt greb
- Anti-rulle-funktion, der sikrer at katetret bliver liggende under klargøring
- 9 cm langt kateter tilpasset til kvinder
- Et diskret look og en neutral farve, designet til at gøre kateterisering mere diskret i hverdagen.



Luja til kvinder 9 cm

Størrelse	Varenummer
Ch10	20051
Ch12	20052
Ch14	20054
Ch16	20056

Antal pr. æske: 30 stk.

* Luja til kvinder sikrede ingen flow stop i 87 % af kateterisationerne & <10 ml residualurin ved første flow stop i 83 % af kateterisationerne (RCTs, post-hoc, NCT05841004, n=73, & NCT05814211, n=82). Coloplast Data-on-File, 01/2024. Individuelle forskelle kan forekomme.

SpeediCath Compact Eve

SpeediCath Compact Eve er udviklet til alle kvinder, der har brug for et kateter til at tømme blæren. SpeediCath Compact Eve har tre primære fordele, som giver en sikker, hygiejnisk og let kateterisation.

- Triple Action Coating Technology sikrer en jævn, glat og fugtig overflade uden tørre pletter, hvilket beskytter urinrøret
- Trekantet form for et bedre greb
- Et-trins-åbning for lettere håndtering og sikker genlukning
- Indbygget urinposekonnektor.

Øger muligheden for non-touch kateterisation i forhold til traditionelle katetre.



SpeediCath Compact Eve 8 cm

Størrelse	Varenummer
Ch10	28110
Ch12	28112
Ch14	28114

Antal pr. æske: 30 stk.

SpeediCath Compact til kvinder

SpeediCath Compact og SpeediCath Compact Plus er udviklet specielt til piger og kvinder. Katetrene er på henholdsvis syv og ni cm og fylder dermed ikke mere end en læbestift i tasken.

- Triple Action Coating Technology sikrer en jævn, glat og fugtig overflade uden tørre pletter, hvilket beskytter urinrøret
- Udviklet specielt til kvinder
- Kompakt længde – fylder ikke mere end en læbestift i tasken
- Klar til brug
- Ligger i en steril saltvandsopløsning
- Hydrofil overflade
- PVC- og phthalatfrit.

Øger muligheden for non-touch kateterisation i forhold til traditionelle katetre.



SpeediCath Compact til kvinder - 7 cm

Størrelse	Varenummer
Ch8	28578
Ch10	28580
Ch12	28582
Ch14	28584

Antal pr. æske: 30 stk.

SpeediCath Compact Plus til kvinder - 9 cm

Størrelse	Varenummer
Ch8	
Ch10	28810
Ch12	28812
Ch14	28814

Antal pr. æske: 30 stk.

SpeediCath Compact Set til kvinder

SpeediCath Compact Set er en alt-i-en-løsning med kateter og integreret urinpose, som giver maksimal frihed til f.eks. kørestolsbrugere, som har svært ved at forflytte sig, sengeliggende, brugere, der skal ud at rejse, eller blot når der ikke er et toilet i nærheden. På grund af den hydrofile overflade, der reducerer ubehag ved indføring, skal der ikke tilføres vand før brug.

- Triple Action Coating Technology sikrer en jævn, glat og fugtig overflade uden tørre pletter, hvilket beskytter urinrøret
- Alt-i-en-løsning
- Diskret design
- Smart indføringsgreb
- Nemt at åbne og genlukke
- Klar-til-brug
- Ligger i en steril saltvandsopløsning
- Hydrofil overflade
- PVC- og phthalatfrit.



Øger muligheden for non-touch kateterisation i forhold til traditionelle katetre.

SpeediCath Compact Set til Kvinder 9 cm

Størrelse	Varenummer
Ch10	28520
Ch12	28522

Antal pr. æske: 20 stk.

SpeediCath Standard til kvinder

SpeediCath Standard-kateter er et engangskateter med en hydrofil overflade, der er klar til brug, PVC- og phthalatfrit. Katetret er derfor både brugervenligt og miljøvenligt.

SpeediCath Standard-katetrene har en enestående overfladebelægning, der ikke blot dækker ydersiden af katetret, men også indersiden af kateterhullerne.

- Triple Action Coating Technology sikrer en jævn, glat og fugtig overflade uden tørre pletter, hvilket beskytter urinrøret
- Klar til brug
- Ligger i en steril saltvandsopløsning
- Hydrofil overflade
- PVC- og phthalatfrit
- Klæbedot til sikkert ophæng
- Gribering giver let åbning af emballagen.



SpeediCath Standard kateter
Nelaton til kvinder 16 cm

Størrelse	Varenummer
Ch6	27706
Ch8	27508
Ch10	27510
Ch12	27512
Ch14	27514
Ch16	27516

Antal pr. æske: 30 stk.

Klar til
brug
katetre
til børn



Heitor | Kateterbruger

Luja til drenge

Luja er det første og eneste engangskateter med mere end 80 mikrohuller, der er designet til at nedsætte risikoen for urinvejsinfektioner ved at tømme din blære helt*, hver gang.

- Triple Action Coating Technology sikrer en jævn, glat og fugtig overflade uden tørre pletter, hvilket beskytter urinrøret
- En fleksibel tip, der gør det nemt og skånsomt at indføre katetret
- Et blødt greb, der giver kontrol, når katetret indføres
- En tør beskyttelsesfilm, der gør det muligt at indføre uden at røre ved selve katetret. Beskyttelsesfilmen hjælper dermed til en hygiejnisk kateterisation.



Luja til drenge 33 cm

Størrelse	Varenummer	Varenummer Lommestørrelse
Ch08		20058
Ch10	20031	20061
Ch12	20032	20062
Ch14	20034	20064
Ch16	20036	
Ch18	20038	

Antal pr. æske: 30 stk.

* Luja har tæt på ingen stop i urinflowet, og en komplet blæretømning er defineret som under 10 mL. Individuelle forskelle kan forekomme (NCT05485922, N=42).

SpeediCath Compact Eve til piger

SpeediCath Compact Eve er udviklet til alle piger og kvinder, der har brug for et kateter til at tømme blæren. SpeediCath Compact Eve har tre primære fordele, som giver en sikker, hygiejnisk og let kateterisation.

- Triple Action Coating Technology sikrer en jævn, glat og fugtig overflade uden tørre pletter, hvilket beskytter urinrøret
- Trekantet form for et bedre greb
- Et-trins-åbning for lettere håndtering og sikker genlukning
- Indbygget urinposekonnektor.

Øger muligheden for non-touch kateterisation i forhold til traditionelle katetre.



SpeediCath Compact Eve til piger 8 cm

Størrelse	Varenummer
Ch10	28110
Ch12	28112
Ch14	28114

Antal pr. æske: 30 stk.

SpeediCath Compact til piger

SpeediCath Compact og SpeediCath Compact Plus er udviklet specielt til piger og kvinder. Katetrene er på henholdsvis syv og ni cm og fylder dermed ikke mere end en læbestift i tasken.

- Triple Action Coating Technology sikrer en jævn, glat og fugtig overflade uden tørre pletter, hvilket beskytter urinrøret
- Udviklet specielt til kvinder/piger
- Kompakt længde – fylder ikke mere end en læbestift i tasken
- Klar til brug
- Ligger i en steril saltvandsopløsning
- Hydrofil overflade
- PVC- og phthalatfrit.

Øger muligheden for non-touch kateterisation i forhold til traditionelle katetre.



SpeediCath Compact til piger - 7 cm

Størrelse	Varenummer
Ch8	28578
Ch10	28580
Ch12	28582
Ch14	28584

Antal pr. æske: 30 stk.

SpeediCath Compact Plus til piger - 9 cm

Størrelse	Varenummer
Ch10	28810
Ch12	28812
Ch14	28814

Antal pr. æske: 30 stk.

SpeediCath Compact Set til børn

SpeediCath Compact Set er en alt-i-en-løsning med kateter og integreret urinpose, som giver maksimal frihed til f.eks. kørestolsbrugere, som har svært ved at forflytte sig, sengeliggende, brugere, der skal ud at rejse, eller blot når der ikke er et toilet i nærheden. På grund af den hydrofile overflade, der reducerer ubehag ved indføring, skal der ikke tilføres vand før brug.

- Triple Action Coating Technology sikrer en jævn, glat og fugtig overflade uden tørre pletter, hvilket beskytter urinrøret
- Alt-i-en-løsning
- Diskret design
- Smart indføringsgreb
- Nemt at åbne og genlukke
- Klar-til-brug
- Ligger i en steril saltvandsopløsning
- Hydrofil overflade
- PVC- og phthalatfrit.



Øger muligheden for non-touch kateterisation i forhold til traditionelle katetre.

SpeediCath Compact Set til børn 9 cm

Størrelse	Varenummer
Ch10	28520
Ch12	28522

Antal pr. æske: 20 stk.

SpeediCath Standard til børn

SpeediCath Standard-kateter er et engangskateter med en hydrofil overflade, der er klar til brug, PVC- og phthalatfrit. Katetret er derfor både brugervenligt og miljøvenligt.

SpeediCath Standard-katetrene har en enestående overfladebelægning, der ikke blot dækker ydersiden af katetret, men også indersiden af kateterhullerne.

- Triple Action Coating Technology sikrer en jævn, glat og fugtig overflade uden tørre pletter, hvilket beskytter urinrøret
- Klar til brug
- Ligger i en steril saltvandsopløsning
- Hydrofil overflade
- PVC- og phthalatfrit
- Klæbedot til sikkert ophæng
- Gribering giver let åbning af emballagen.



SpeediCath Standard kateter Nelaton til børn 16 cm

Størrelse	Varenummer
Ch6	27706
Ch8	27708
Ch10	27710

Antal pr. æske: 30 stk.

SpeediCath Standard kateter Nelaton til børn 26 cm

Størrelse	Varenummer
Ch8	27608
Ch10	27610
Ch12	27612

Antal pr. æske: 30 stk.

EasiCath katetre




Vladimir | Kateterbruger

EasiCath Katetre

EasiCath-kateter er et sterilt overfladebehandlet engangskateter til intermitterende kateterisation.

EasiCath har en enestående overfladebelægning, der aktiveres efter 30 sek. i vand. Overfladebelægningen dækker ikke blot ydersiden af katetret, men også indersiden af kateterhullerne. Det skaber en glat overflade, der reducerer friktionen mellem katetret og slimhinden i urethra. Derved mindskes risikoen for skader på lang sigt.

- Triple Action Coating Technology sikrer en jævn, glat og fugtig overflade uden tørre pletter, hvilket beskytter urinrøret
- Hydrofil overflade
- Overfladebehandlede kateterhuller
- Bredt sortiment.

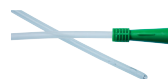

Nelaton – lige spids



Tiemann – bøjet spids

EasiCath®

EasiCath kateter til mænd
Nelaton 35 cm

Størrelse	Varenummer
Ch8	5348
Ch10	5350
Ch12	5352
Ch14	5354
Ch16	5356
Ch18	5358
Ch20	5360
Ch22	5362

Antal pr. æske: 25 stk.

EasiCath kateter til mænd
Tiemann 35 cm

Størrelse	Varenummer
Ch12	5382
Ch14	5384
Ch16	5386

Antal pr. æske: 25 stk.

EasiCath kateter
til kvinder/børn 16 cm

Størrelse	Varenummer
Ch8	5368
Ch10	5370
Ch12	5372
Ch14	5374
Ch16	5376

Antal pr. æske: 25 stk.

Transanal irrigation

Transanal irrigation

Transanal irrigation (TAI) er en måde at tømme tarmen på. Transanal irrigation kan anvendes både ved afføringsinkontinens og forstoppelse. Transanal irrigation må kun påbegyndes i samarbejde med en læge/sygeplejerske.


Selve proceduren ved transanal irrigation består i at indføre 100-1000 ml kropstempereret vand i endetarmen via et rektalkateter. Typisk skelner man mellem lavt skyl (op til 250 ml vand) og højt skyl (over 250 ml vand).

Når tyktarmen fyldes med vand, stimuleres afføringsrefleksen. Derved igangsættes en fremdrift af afføring i tarmen.

Efter endt indføring, vil vand og afføring tømmes ud i toilettet.

Procedurens varighed er individuel, men som oftest vil indføring og tømning vare ca. 30 min. og vil typisk skulle foretages én gang hver eller hver anden dag.

Ved transanal irrigation tømmes tyktarmen effektivt, hvilket forebygger udvikling af forstoppelse og reducerer risikoen for afføringsinkontinens mellem tarmskylningerne.

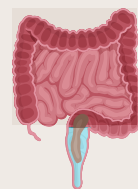

Transanal irrigation med **lavt** skyl



Transanal irrigation med **højt** skyl

Peristeen Light

Peristeen Light er et produkt til transanal irrigation (TAI), der med et lavt skyl (175 ml) kan hjælpe med at håndtere tarmproblematikker, såsom forstoppelse eller afføringsinkontinens. Beholderen er designet til at være let at bruge, så uanset om man er derhjemme eller på farten, kan tarmskylning let udføres.

Konuskatetret er afrundet og har to store vandøjne. Katetret har en overfladebelægning og er derfor til engangsbrug for at sikre en skånsom indføring hver gang.

Bunden på konuskatetret er designet til at forhindre, at afføring kommer i kontakt med ydersiden af vandbeholderen.

Envejsventilen er designet til at forhindre tilbageløb af vand og afføring.

Låget er designet til at gå ud over beholderen, så det er lettere at åbne.

Vandbeholderen er designet til at være let at holde og klemme. Den indeholder 175 ml vand. Den er designet til at være praktisk at bruge både derhjemme og på farten. Vandbeholderen kan bruges op til 30 gange.

Peristeen Light

Produktnavn	Varenummer
Peristeen Light 175 ml sæt (15 stk.)	29170
Peristeen Light 175 ml sæt (30 stk.)	29171
Peristeen Light konuskatetre (15 stk.)	29172



Carina | Bruger

Peristeen Plus

Peristeen Plus er et produkt til transanal irrigation (TAI), der med et højt skyl (250-1000 ml) kan hjælpe med at håndtere tarmproblematikker, der hvor et lavt skyl ikke er tilstrækkeligt. Produktet kommer med to størrelser ballonkateter og et konuskateter, så det er muligt at tilpasse til den enkelte bruger.

Ét samlet system

Peristeen Plus Transanal irrigation indeholder alt, hvad der skal til for at skylle tarmen. Systemet består af en kontrolenhed med pumpe (kan bruges 90 gange), en vandpose (kan bruges 15 gange) og et ballonkateter eller konuskateter (engangsbrug).

Lettere håndtering*

De mange detaljer ved Peristeen Plus Transanal irrigation er specielt udviklet til mennesker med nedsat håndmotorik.

Ergonomisk design

Kontrolenheden er let at betjene og guider brugeren igennem proceduren med de simple og forklarende symboler.



Peristeen Plus - ballonkateter

Produktnavn	Varenummer
Peristeen Plus-system med ballonkateter (inkl. toilettaske)	29140
Peristeen Plus-system med ballonkateter (ekskl. toilettaske)	29141
Peristeen Plus ballonkateter tilbehørspakke (15 stk. kat.)	29142
Peristeen Plus ballonkateter (10 stk.)	29143
Peristeen Plus vandpose (3 stk.)	29144
Peristeen fikseringsbånd	29145
Peristeen Plus slanger (2 stk.)	29146
Peristeen Plus-system med ballonkateter (inkl. toilettaske) - lille	29147
Peristeen Plus ballonkateter tilbehørspakke - lille (15 stk. kat.)	29149
Peristeen Plus ballonkateter - lille (15 stk.)	29150



Peristeen Plus - konuskateter

Produktnavn	Varenummer
Peristeen Plus-system med konuskateter (inkl. toilettaske)	29160
Peristeen Plus-system med konuskateter (ekskl. toilettaske)	29161
Peristeen Plus konuskateter tilbehørspakke (15 stk. kat.)	29162
Peristeen Plus konuskateter (15 stk.)	29163



Uridomer og urinposer

Conveen Optima Uridomer

Conveen Optima Uridomer er et lækagefrit og hudvenligt uridom. Uridomet ligger i en smart og diskret emballage, og fylder dermed ikke ret meget.

- Smart og diskret æske
- Balanceret klæber, som er meget hudvenlig og samtidig nem at fjerne
- Behageligt materiale, som huden kan ånde igennem
- Dobbeltstrip sikrer hurtig og sikker påsætning
- Lækagefrit system.

Conveen Optima Uridom standard længde

Størrelse	Varenummer
Ø 25 mm	22025
Ø 28 mm	22028
Ø 30 mm	22030
Ø 35 mm	22035
Ø 40 mm	22040

Antal pr. æske: 30 stk.



Conveen Optima Uridom kortere længde

Størrelse	Varenummer
Ø 21 mm	22121
Ø 25 mm	22125
Ø 30 mm	22130
Ø 35 mm	22135

Antal pr. æske: 30 stk.



Conveen Security+ Uridomer

Conveen Security+ Uridomer er fremstillet af et materiale, som er blødt, meget hudvenligt og behageligt at have på.

Conveen Security+ findes i både en selvklæbende variant og i en variant med klæbestrip.

Begge varianter findes i 5 forskellige størrelser, og den selvklæbende variant findes i to længder.

- Sikker og hudvenlig klæber
- Blødt og hudvenligt materiale
- Nem tilslutning til urinpose
- Knækfrit udløb.



Conveen Security+ Uridom og Klæbestrip

Størrelse	Varenummer
Ø 21 mm	5021
Ø 25 mm	5025
Ø 30 mm	5030
Ø 35 mm	5035
Ø 40 mm	5040

Antal pr. æske: 30 stk.

Conveen Security+ Selvklæbende Uridom standard længde

Størrelse	Varenummer
Ø 21 mm	5221
Ø 25 mm	5225
Ø 30 mm	5230
Ø 35 mm	5235
Ø 40 mm	5240

Antal pr. æske: 30 stk.

Conveen Security+ Selvklæbende Uridom ekstra kort længde

Størrelse	Varenummer
Ø 21 mm	22011
Ø 25 mm	22012
Ø 30 mm	22013
Ø 35 mm	22014

Antal pr. æske: 30 stk.

Conveen Uridomer

Conveen Uridomer er lavet af et blødt og behageligt latexmateriale. Uridomet findes i en selvklæbende variant og en variant med uridom og klæbestrip.

- Behageligt og blødt materiale
- Sikker og hygiejnisk i brug
- Nem tilslutning til urinpose.

Conveen Uridom og Klæbestrip

Størrelse	Varenummer
Ø 25 mm	5125
Ø 30 mm	5130
Ø 35 mm	5135
Ø 40 mm	5140

Antal pr. æske: 30 stk.



Conveen Selvklæbende Uridom

Størrelse	Varenummer
Ø 20 mm	5212
Ø 25 mm	5200
Ø 30 mm	5205
Ø 35 mm	5210
Ø 40mm	5215

Antal pr. æske: 30 stk.



Conveen Active Urinpose

Conveen Active er en diskret urinpose, der sammen med Conveen Optima-uridomer er en sikker løsning til mænd med inkontinens, som ønsker komfort og diskretion, også når de er aktive. Posens unikke design gør, at den ikke ligner en traditionel urinpose.

- Integreret system
- Sikker fiksering
- Blødt og elastisk materiale.

Conveen Active Urinpose

Størrelse	Slangelængde	Varenummer
250 ml	7 cm	25501

Antal pr. æske: 10 stk.



Conveen Security+ Urinposer

Conveen Security+ urinposer repræsenterer en generation af urinposer, hvor både pose og slange er lavet af Polyethylen, som er mere miljøvenligt end PVC.

Polyethylen er et blødere og lettere materiale, som giver brugeren større komfort.

- Unikt design i et miljøvenligt materiale
- Anti-kink slange
- Sikker og enkel tømningssventil
- Blød, hudvenlig bagside
- Bredt sortiment i steril og usteril udgave
- Justerbar slange.



Conveen Security+ Urinpose

Størrelse	Slangelængde	Varenummer
350 ml	30 cm	5164
350 ml	50 cm	5165
500 ml	6 cm	21022
500 ml	30 cm	5160
500 ml	50 cm	5161
750 ml	30 cm	5166
750 ml	50 cm	5167

Antal pr. æske: 10 stk.

Conveen Security+ Sterile Urinposer

Conveen Security+ Urinpose - Steril

Størrelse	Slangelængde	Varenummer
350 ml	50 cm	21016
500 ml	30 cm	5162
500 ml	50 cm	5163
700 ml	50 cm	21018

Antal pr. æske: 10 stk.



Prøveudtag på alle sterile poser.

Conveen Natdrænageposer

Conveen Security+ Natdrænagepose

Størrelse	Slangelængde	Varenummer
2000 ml	140 cm	21346

Antal pr. æske: 10 stk.

Conveen Contour Flerkammerbenpose

Conveen Contour er en flerkammerbenpose, som sikrer, at urinen fordeler sig i flere kamre og dermed gør posen meget diskret.

- Flere kamre fordeler urinen
- Sikker tømningsventil
- Justerbar slangelængde
- Steril og usteril udgave



Conveen Contour Urinpose

Størrelse	Slangelængde	Varenummer
600 ml	45 cm	5170
800 ml	45 cm	5174

Antal pr. æske: 10 stk.

Conveen Contour Urinpose - Steril

Størrelse	Slangelængde	Varenummer
600 ml	45 cm	5171

Antal pr. æske: 10 stk.

Fikseringsbånd

- til alle urinposer

Fikseringsbånd

	Varenummer
Fikseringsbånd med knapper	5050
Fikseringsbånd med silikone	21380

Antal pr. æske: 10 sæt á 2 bånd.



Hudpleje



Jefferson | Bruger

**Comfeel®
Conveen®**

Comfeel Barriere

- til forebyggelse af hudproblemer

- Skaber en tynd barriere mellem huden og omgivelserne
- Er væskeafvisende
- Genskaber og bevarer hudens normale pH-værdi
- Trænger hurtigt ind i huden
- Indeholder ikke parfume.

Comfeel Barriere

Volumen	Varenummer
60 g	4720

Enkeltstykspakket.



Conveen Protact

- til forebyggelse, beskyttelse og behandling af rød og irriteret hud

- Skaber en let barriere mellem huden og omgivelserne
- Genopbygger macereret og irriteret hud
- Genskaber og bevarer hudens normale pH-værdi
- Er væskeafvisende.

Conveen Protact

Volumen	Varenummer
50 g	65050
100 g	65100

Enkeltstykspakket.



Conveen Critic Barriere

- når huden er væskende, macereret og meget irriteret

- Skaber en kraftig barriere mellem huden og omgivelserne
- Lindrer rød og irriteret hud
- Genskaber og bevarer hudens normale pH-værdi
- Indeholder ikke parfume eller konserveringsmidler
- Er væskeafvisende.

Conveen Critic Barriere

Volumen	Varenummer
50 g	66102
100 g	66103

Enkeltstykspakket.



Coloplast Kundeservice

Hos Coloplast hjælper vi hver dag mange brugere med spørgsmål om deres engangskateter, uridom, afføringsinkontinens eller stomiprodukt.

Vores kunderådgivere hjælper typisk med:

- Spørgsmål til produkter
- Spørgsmål til, hvordan man rejser med produkter og særlige behov på ferien
- Bestilling af vareprøver eller tilmelding til servicetilbud mv.

Alle brugere, pårørende og sundhedspersonale er velkomne til at ringe til vores erfarne kunderådgivere, der kan besvare langt de fleste spørgsmål. I tilfælde, hvor der er brug for en sundhedsfaglig vurdering, stiller kunderådgiverne videre til vores sygeplejersker eller opfordrer brugeren til at kontakte hospital/egen læge.

Coloplast Kundeservice er åben alle hverdage mellem 8.30-16.00.

Ring til os på **49 11 12 13**.



Ditte | Kunderådgiver

Kristine | Kunderådgiver

Coloplast was founded on passion, ambition, and commitment. We were born from a nurse's wish to help her sister and the skills of an engineer.

Guided by empathy, our mission is to make life easier for people with intimate healthcare needs. Over decades, we have helped millions of people live more independent lives and continue to do so through innovative products and services.

Globally, our business areas include Ostomy Care, Continence Care, Wound and Skin Care, Interventional Urology and Voice and Respiratory Care.