

Forstærket gelfiber-bandage for optimal absorption

Biatain® Fiber med HexaLock® teknologi er en blød, steril gelfiber-bandage, der består af 100% cellulosefibre (CMC), varme- og ultralydsbehandlet med BiCo fibre for ekstra styrke for optimal absorption og retention.

- Absorberer effektivt eksudat og bakterier og låser det inde
- Former sig blidt efter sårbunden og minimerer risikoen for ophobning af eksudat i hulrum
- HexaLock teknologien sikrer en nem aftagning i ét stykke uden at efterlade bandagerester

Biatain Fiber med HexaLock teknologi fremmer sårhelingsprocessen ved at understøtte autolytisk debridering og oprensning af fibrin.

Biatain® Fiber




Biatain[®] Fiber med HexaLock[®] Technology


Den unikke HexaLock teknologi integrerer gelfibrene i et ekstra forstærket sekskantet struktur, så Biatain Fiber låser eksudatet inde og reducerer ophobning af eksudat for optimale sårhelingsbetingelser.



BiCo-fibre er blandet sammen med CMC-gelfibre for **ekstra styrke**.

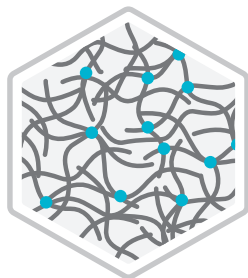

Fibrene er **holdt sammen** ved varmebehandling.

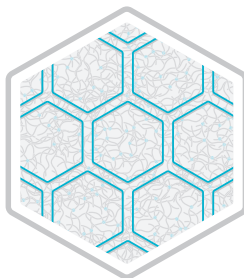

Biatain Fiber er **ekstra forstærket** - uden brug af tråde - i en unik sekskantet struktur, som er **ultralidsbehandlet**.



Biatain Fiber anvendes til behandling af kraftigt væskende sår, herunder kavitetsår samt underminerede sår.

Biatain Fiber



Varenummer	Størrelse	Antal i æske
33501	5 x 5 cm	10
33503	10 x 10 cm	10
33506	15 x 15 cm	10
33507	19 x 25 cm	10
33508	2,5 x 46 cm	10



Læs mere om Biatain Fiber

Scan QR-koden eller gå til www.biatainfiber.dk

[Ostomy Care](#) / [Continence Care](#) / [Wound & Skin Care](#) / [Interventional Urology](#)

Coloplast Danmark A/S, Høltedam 1, 3050 Humlebæk. WC0105
www.coloplast.dk Coloplast logo er et registreret varemærke ejet af Coloplast A/S. © 2019-11. Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S.

 **Coloplast**