

Former perfekt. Hver gang.

Biatain® med unik 3DFit Technology former sig efter sårbunden, fylder hulrummet mellem sårbund og bandage, og reducerer ophobning af eksudat for optimale sårhelingsbetingelser.

- Former sig efter sårbunden
- Absorberer vertikalt
- Låser eksudatet inde

Biatain®



3DFit Technology fylder hulrummet og reducerer ophobning af ekssudat




Former sig efter sårbunden

Ved kontakt med sårekssudat udvider og former skummen sig efter sårbunden og reducerer ophobning af ekssudat.



Absorberer vertikalt

Mikrokapillærene i skumstrukturen absorberer ekssudatet vertikalt.

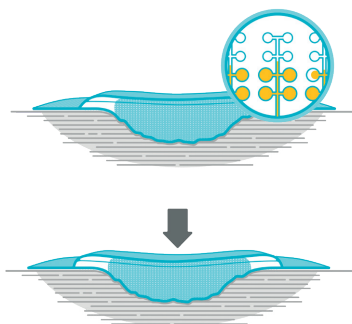

Låser ekssudatet inde

Ekssudatet holdes inde og retineres under kompression, således at risikoen for lækage og maceration af sårkanten og huden omkring såret reduceres.

Produktopbygning

Biatain ikke klæbende er en blød og formbar polyurethan skumbandage med en semi-permeabel bakterie- og vandtæt topfilm og affasede kanter, så trykmærker minimeres. Biatain klæbende består desuden af en hydrokolloidklæbekant.

Anvendelse

Biatain anvendes til en lang række væskende sår, som bensår, tryksår, 2. grads forbrændinger, donorsteder og hudafskrabninger. Biatain ikke klæbende kan også anvendes til ikke-inficerede diabetiske fodsår. Biatain kan anvendes under kompression.

Biatain ikke-klæbende

Varenr.	Størrelse i cm	Antal i æske
6105	5x7	10
3410	10x10	10
3412	10x20	5
3413	15x15	5
3416	20x20	5

Biatain klæbende

Varenr.	Størrelse i cm	Antal i æske
3462	7,5x7,5	10
3420	12,5x12,5	10
3421	15x15	5
3423	18x18	5
3426	18x28	10
3483	17x17 Sakral	5
3485	23x23 Sakral	5
3488	19x20 Hæl	5