

## **Coloplast Drænage**


*Specielt udviklet drænpose*

- *Hudvenlig klæber*
- *Tilbageløbsventil*
- *Handskevenlig påsætning*





# Coloplast Drænage

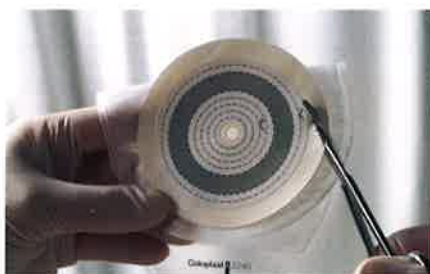

## Tilbageløbsventil

Posen har en tilbageløbsventil, der hindrer drænposens indhold i at løbe tilbage.

## Volumenindikator

Mængden af sekretion aflæses præcist og nemt ved hjælp af volumenindikatoren på posen.

Coloplast drænpose er en specialudviklet drænpose, der opfylder behovene for en sikker og hygiejnisk løsning ved bandagering af passiv drænage.



## Hudvenlig klæber

Den hydrokolloide hudklæber absorberer sekretion fra hud og dræn, således at risikoen for maceration af huden minimeres. Oversiden af klæberen er præget med et mønster, der gør den endnu mere fleksibel.

Klippeguiden på klæberens beskyttelsespapir letter arbejdet med at tilpasse hudklæberens starthul og yderkant. Takket være en gennemtænkt detalje, er det nemt at påsætte posen også med handsker.

## Behagelig posefolie

Poserne er forsynet med en blød stofflignende bagside, hvilket gør det behageligt for patienten og minimerer risikoen for hudirritation.

Den klare posefolie gør det nemt at inspicere indholdet - uden at posen skal aftages. Posefolien er lavet af en blød pvc-fri plastfolie.

## Nemt håndterbart udløb

Posens udløb kan tilsluttes de fleste natdrænageposer uden brug af konektor. Det er både hygiejnisk og nemt. Det bløde materiale er behageligt for patienten, og gør det samtidig muligt at presse evt. koagler/klumper ud.



## Sortimentsoversigt

	Produktnr.	Volumen	Antal pr. æske
Steril	2210	Mini 100 ml	10
	2215	Midi 300 ml	10
	2220	Maxi 500 ml	10
Usteril	2240	Mini 100 ml	20
	2245	Midi 300 ml	20
	2250	Maxi 500 ml	20



Coloplast Danmark A/S  
Møllevej 11-15  
DK-2990 Nivå  
Telefon 49 11 12 13  
Telefax 49 11 12 12  
www.coloplast.dk